

SEGURANÇA

- Sistema fechado com filtro bacteriológico.

PROTEÇÃO

- Sistema antirrefluxo.

FACILIDADE


- Ponto de coleta de amostra de diurese, com sistema fechado.

PRATICIDADE

- Extensão em PVC de 60cm que permite excelente posicionamento no leito.



O COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO GMI, REÚNE A PRECISÃO NA MENSURAÇÃO DO DÉBITO URINÁRIO, COM A SEGURANÇA DO SISTEMA FECHADO EM UM ÚNICO DISPOSITIVO.

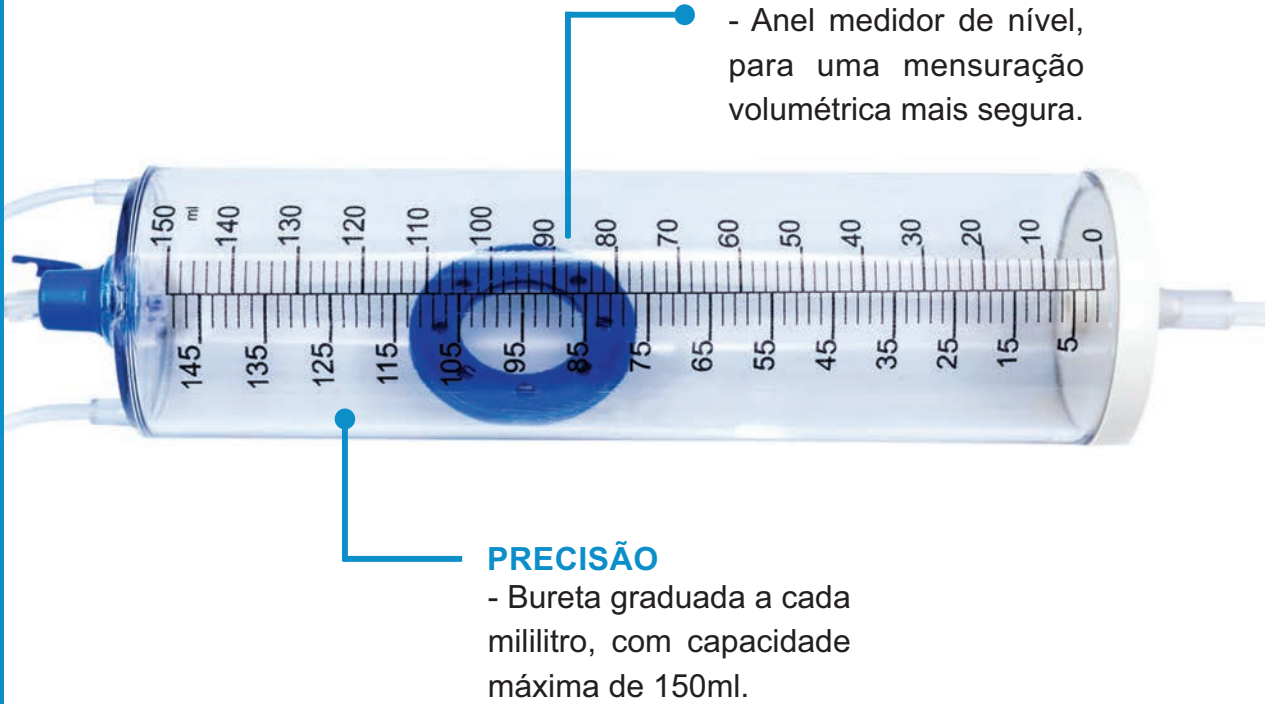

INDICAÇÃO

- O Coletor de urina sistema fechado neonatal GMI, é específico para monitoramento de diurese horário, possui sistema fechado de coleta, diminuindo os riscos de contaminação cruzada e possíveis infecções de repetição. Uso neonatal, no qual há necessidade de precisão sobre o balanço hídrico do paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Possui bureta com capacidade de 150ml com filtro bacteriológico.
- Bolsa coletora de 400ml com clamp, conector *luer lock* e válvula antirrefluxo.
- Prolongamento em tubo PVC com 60cm de comprimento, entre a bureta e o ponto de coleta.
- Estéril.

499 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO (NEONATAL) GMI			
Registro ANVISA N° 80423540002			
	BURETA GRADUADA	BOLSA COLETORA	
Código 499 - S	150ml	400ml	Extensão em PVC 60cm